

吹氮濃縮加熱裝置 Termovap Sample Concentrator

吹氮濃縮加熱裝置的應用

吹氮濃縮加熱裝置適用於液相、氣相及質譜分析中的製備樣品。它採用國際認可方法，將氮氣吹入加熱樣品的表面進行樣品濃縮，具有省時、操作方便、容易控制等特點，可很快得到預期的結果。採用固相萃取前處理技術代替傳統的液體萃取和層析技術，可使樣品迅速分離、淨化；使用吹氮加熱方式取代常用的旋轉蒸發儀進行濃縮，可使分析時間大為縮短。





SC-2800D 乾浴型



SC-2800W 水浴型

ChromTech[®] 吹氮濃縮加熱裝置特點

- 本儀器藉由管路及吹針將氮氣吹到樣品表面，完成液體樣品的無氧濃縮。
- SC-2800W 水浴型活動式試管架可將試管移出或移入水槽，並可固定在支架上任意高度。
- SC-2800D 乾浴型採用鋁塊作為傳熱介面，適用於快速的加熱和溫度控制。
- 多種孔數的鋁塊和相應的吹針可供選擇，吹管互相獨立，不會引起交叉污染。
- 內部專門設計的接水盒，防止操作不慎溢出液體損壞內部零件。
- 超厚的加熱鋁塊使溫度更加均勻準確，感應器直接由鋁塊測得實際溫度。
- 兩組雙排四位數字分別顯示設定溫度與實際溫度及設定運轉時間與實際運轉時間。
- 自動溫度保護功能可以防止儀器超溫損壞；有定時恆溫及連續恆溫兩種設定方式。

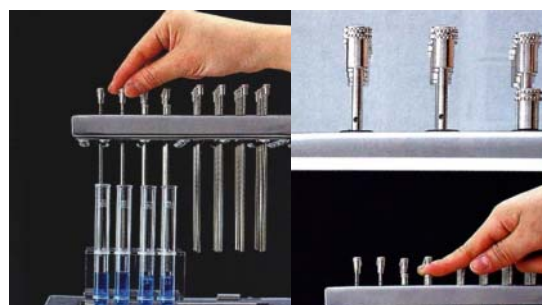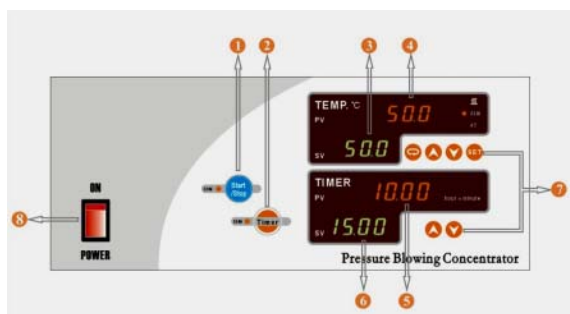

吹氮濃縮加熱裝置 Termovap Sample Concentrator

SC-2800W/ SC-2800D 吹氮濃縮加熱裝置



型號	SC-2800W 水浴型 SC-2800D 乾浴型
加熱試管數	12 支、24 支、40 支
溫度加熱範圍	室溫+5 ~ 180
溫度精確度	±0.1
上限溫度保護	185
溫度偏差保護	設定溫度+5
定時時間設定	10 分鐘 ~ 99 小時 59 分鐘
加熱功率(W)	350 W
SC-2800D 型 加熱塊孔數	Standard size 6 孔/12 孔/20 孔 Double size 12 孔/24 孔/40 孔
SC-2800D 型 容納加熱塊	2 塊 Standard size (95*70*75mm) or W * H * L 1 塊 Double size (150*70*95mm)
外部尺寸 mm (W x H x D)	240 * 130 * 215mm (不含支架高度)

SC-2810D 吹氮濃縮加熱裝置 (大孔徑試管)



型號	SC-2810D-8 (8 支) SC-2810D-12 (12 支)
溫度加熱範圍	室溫+5 ~ 300
溫度精確度	±0.1
溫度保護方式	上限溫度保護及設定溫度偏差保護
定時時間設定	10 分鐘 ~ 99 小時 59 分鐘
操作環境溫度	5 ~ 35
加熱功率(W)	1350 W
加熱塊孔數	8 孔/12 孔
加熱塊尺寸 mm (W x L x D)	210mm * 95mm * 150mm
外部尺寸 mm (W x L x H)	268mm * 230mm * 165mm (不含支架高度)